




















# ***DENTACONTROL***

Mode d'emploi  
à lire attentivement

Gebruiksaanwijzing  
zorgvuldig lezen

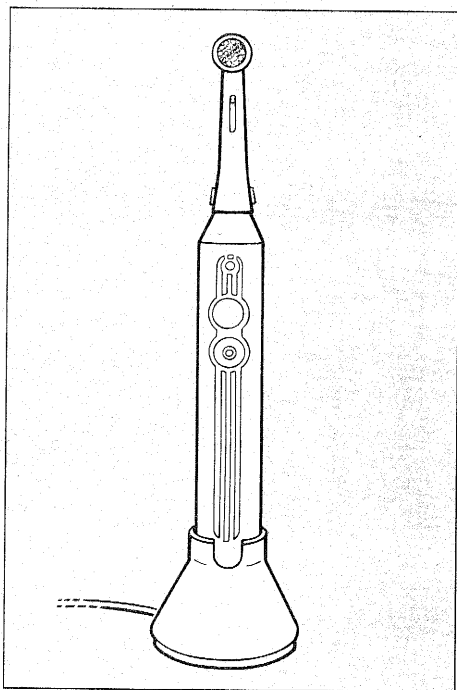

**Mod. 6924**

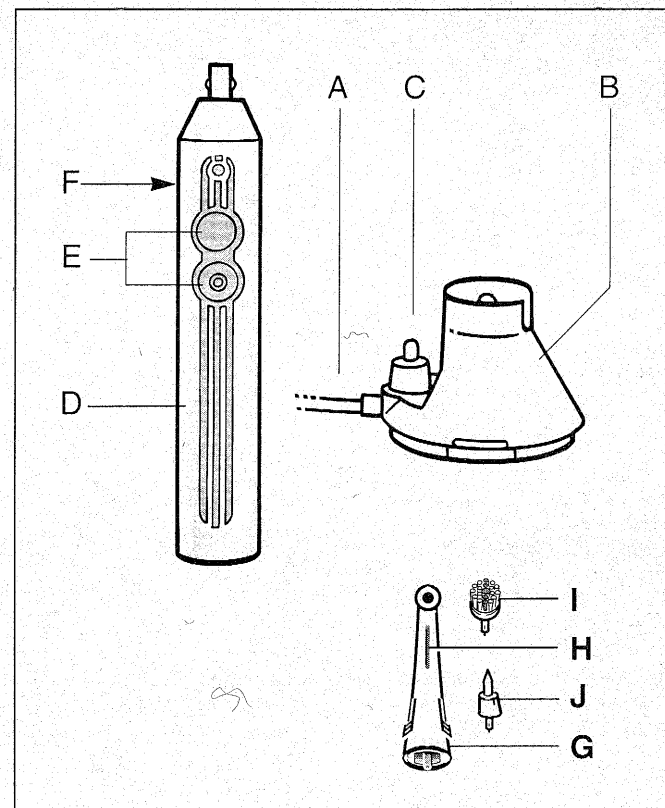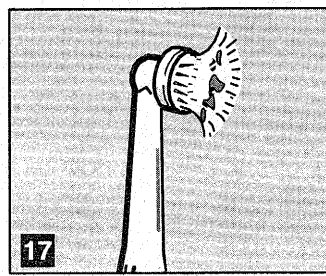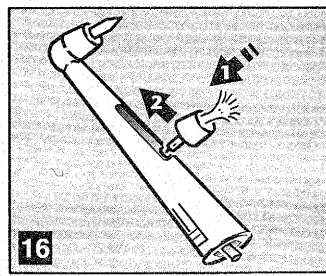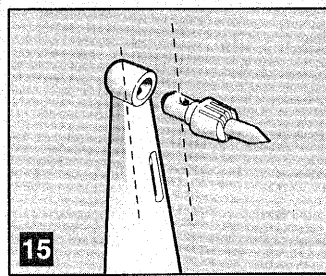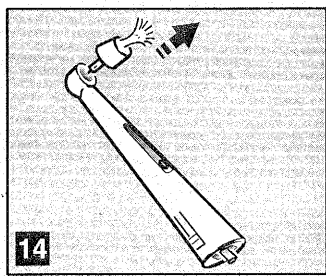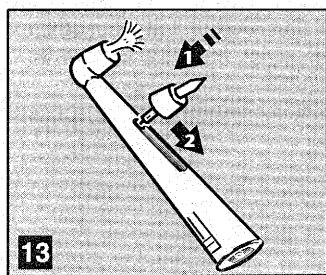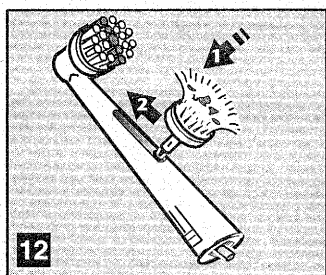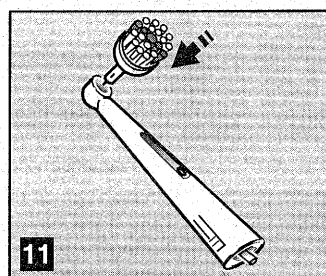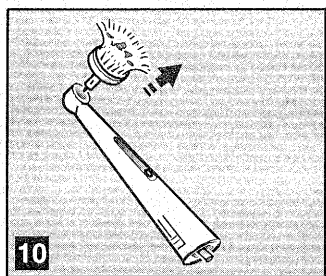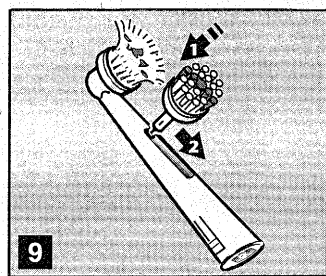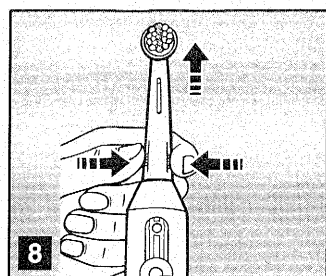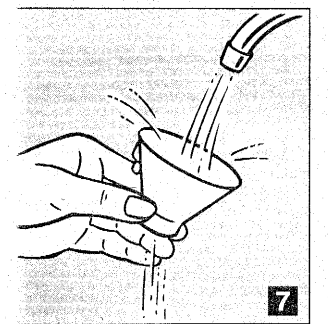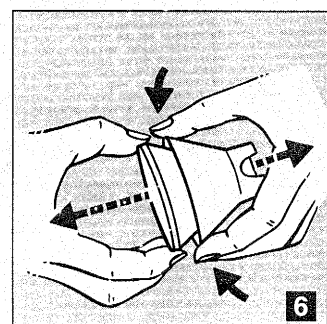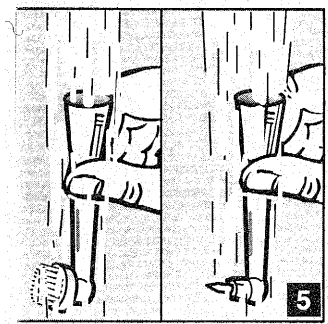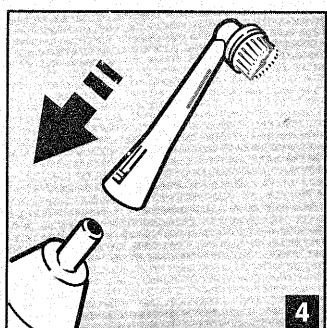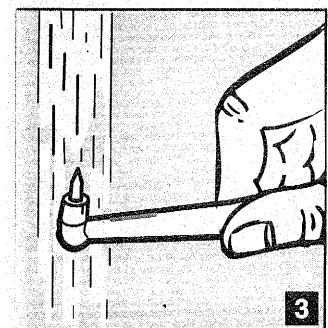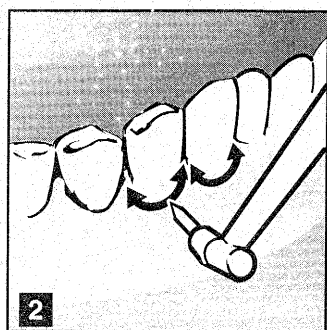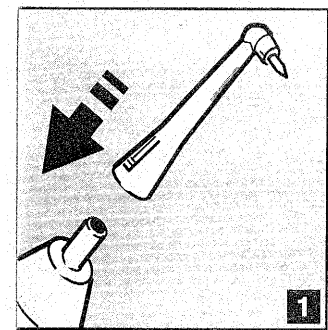

Français

**DESCRIPTION DE L'APPAREIL :**

- A Cordon
- B Bloc de chargement compact
- C Rangement de la brosette intégré
- D Corps de la brosette intégré
- E Interrupteur marche/arrêt
- F Support (au dos)

**Équipement (selon modèle) :**

- G Manche de la brosette
- H Verrouillage du clip de la brosette
- I Clip brosette ronde rotative
- J Clip brosette micro-clean à marquage de couleur

## ⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- L'appareil est conforme aux directives communautaires de sécurité et de compatibilité électro-magnétique.
- ▶ Courant alternatif seulement- vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- ▶ Attention : La brosse rechargeable possède un accu à tension continue de 2,4 V env. et n'est pas reliée au secteur durant l'utilisation.
- ▶ Prudence ! Le chargeur est relié à une tension alternative de 220-240 V et ne peut donc pas être utilisé sous la douche, dans la baignoire ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.
- ▶ Ne pas plonger l'appareil dans l'eau !
- ▶ Débrancher l'appareil avant chaque nettoyage ou entretien.
- ▶ Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil.
- ▶ Ne pas faire fonctionner l'appareil si :
  - l'appareil ou le cordon sont endommagés,
  - l'appareil est tombé par terre.Dans ce cas, ne pas l'ouvrir, mais le retourner à un Centre Service agréé Calor (les adresses figurent sur la liste jointe).
- ▶ Si le cordon venait à être endommagé l'appareil doit être jeté ou recyclé, car il n'est pas possible de remplacer le cordon.
- ▶ Ne pas ouvrir le chargeur. En cas d'anomalie, retourner l'appareil complet à un Centre Service agréé CALOR (les adresses figurent sur la liste jointe).
- ▶ Confier les réparations uniquement à un spécialiste. Réparer un appareil soi-même peut constituer un danger pour l'utilisateur.
- ▶ Les corps de brosses 6924 ne doivent être utilisés qu'avec des chargeurs des modèles équivalents.
- ▶ La brosse à dents est équipée d'accus au nickel-cadmium. Ne pas les jeter aux ordures ménagères mais les remettre au Centre Service agréé CALOR le plus proche ou aux lieux spécialement prévus à cet effet.
- ▶ Pour d'éventuelles détériorations de l'appareil dues à une utilisation inappropriée ou non conforme au mode d'emploi ( voir : "Ce que vous devez savoir"), aucune responsabilité ne peut engager Calor.
- Si l'appareil ne peut plus servir, le rendre définitivement inutilisable et l'envoyer dans une décharge spéciale.

## 1 - AVANT UTILISATION

### Chargement de la brosse à dents rechargeable

- Avant la première utilisation, la brosse à dents rechargeable devrait être chargée pendant environ 24 heures.
- Brancher l'appareil.
- Remarque : le chargeur peut être raccordé à toute prise à tension alternative de 220 à 240 V, ainsi qu'à des prises pour rasoir.
- Arrêter la brosse à dents et la placer sur la broche du chargeur.

**Remarque :** Le corps de la brosse à dents doit toujours être à l'arrêt lorsqu'il se trouve sur le chargeur, sinon il n'y a pas de chargement. Le chargeur peut être constamment branché, une surcharge de la brosse à dents étant impossible. Pour assurer une plus longue durée de vie de l'accumulateur, nous recommandons de vider celui-ci périodiquement par l'utilisation avant de le recharger complètement. L'accumulateur doit être rechargé lorsque la capacité de brosse de la brosse à dents diminue sensiblement. A pleine charge, la brosse à une autonomie maximale d'environ 30 minutes.

## 2 - UTILISATION DE LA BROSSÉ A DENTS

- Insérer un support muni d'un clip micro-clean sur le corps de brosse jusqu'à l'encliquetage (fig. 1).
  - Les poils doivent toujours être orientés vers l'interrupteur marche/arrêt.
  - Le support au dos du corps de la brosse empêche celle-ci de bouger, lorsqu'elle est posée horizontalement par exemple lors de l'application de dentifrice.
  - Humidifier les poils (ne pas utiliser de dentifrice) et placer la pointe de la brosette à l'endroit du contact entre les dents et les gencives (fig. 2). Mettre en marche l'appareil. En appliquant une légère pression, faire passer la brosette le long du bord des gencives et dans les espaces interdentaires.
- Répéter cette opération sur le bord des gencives de la mâchoire supérieure et inférieure, ainsi que sur les faces internes et externes. Utiliser le clip micro-clean pendant environ 1 minute, en fonction de la position individuelle des dents.
- Eteindre l'appareil.
  - Enlever l'embout de la brosette et le rincer à l'eau (fig. 3).
  - Insérer le clip brosette ronde rotative sur le corps de la brosse à dents (fig. 4).
  - Les poils doivent toujours être orientés vers l'interrupteur marche/arrêt.
  - Humidifier les poils, appliquer du dentifrice et ne mettre la brosette en marche qu'après avoir introduit celle-ci dans la bouche, en vue d'éviter des éclaboussures du dentifrice.
  - Faire passer la brosette d'une dent vers l'autre, sans appliquer de pression importante. Nettoyer soigneusement toutes les surfaces des dents, les faces internes des dents et les bords. La durée de brosse recommandée avec le clip rotatif est de 2 minutes.
  - Arrêter l'appareil avant de sortir la brosette de la bouche.
  - Prière de tenir compte des recommandations données sous "Nettoyage et Entretien".

**Les gencives peuvent légèrement saigner durant les premiers jours d'utilisation d'une brosse électrique si celles-ci sont sensibles. Consulter un dentiste si le saignement devait durer plusieurs jours.**

## 3 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- En vue d'assurer un fonctionnement hygiénique et technique durable des embouts, il faut rincer ceux-ci à fond à l'eau chaude après chaque utilisation. Pour rincer le clip brosette ronde rotatif, mettre en marche la brosse.
- Rincer à fond les embouts enlevés à l'eau chaude (fig. 5) et les secouer ou les sécher avant de les remettre sur le support ou dans le compartiment de rangement (selon le modèle).
- Des résidus de dentifrice et l'usure de la mécanique risquent de détériorer le fonctionnement de l'embout de la brosette. Nous vous recommandons donc de bien le rincer soigneusement après chaque utilisation et de le faire éventuellement tremper en vue d'éliminer complètement les résidus de dentifrice.
- Au plus tard lors du troisième remplacement du clip de la brosette, il faudrait remplacer également le manche de la brosette.
- Comme des résidus de dentifrice risquent de se fixer dans l'axe d'entraînement, il est recommandé de rincer aussi brièvement le corps de la brosse à dents et de le sécher.

■ La partie supérieure du socle peut être enlevée facilement. Une légère pression sur les 2 points d'enclenchement latéraux permet d'enlever la partie supérieure, celle-ci pouvant être nettoyée à la main ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle (fig. 6 et 7).

Si nécessaire, les éléments peuvent être essuyés avec un chiffon humide, puis séchés.

**Ne jamais immerger les parties chargeur dans l'eau, ni dans le lave-vaisselle.**

## REPLACEMENT DU CLIP BROSETTE RONDE :

**ATTENTION :** Pour remplacer le clip, détacher l'embout du corps de la brosse à dents (fig.8).

Faire glisser le verrouillage avec le nouveau clip (fig.9) et sortir le clip usé (fig.10).

**Mettre en place le nouveau clip en veillant à ce que les poils de couleur soient positionnés dans l'axe du support de la brosette (fig.11).**

Faire glisser le verrouillage vers le haut à l'aide de l'ancien clip (fig.12). Veillez à ce que le système de verrouillage soit complètement remonté jusqu'en haut afin d'assurer une parfaite fixation du clip.

## REPLACEMENT DU CLIP BROSETTE FINE MICROCLEAN :

**ATTENTION :** Pour remplacer le clip, détacher l'embout du corps de la brosse à dents (fig. 8).

Faire glisser le verrouillage avec le nouveau clip (fig.13) et sortir le clip usé (fig.14).

**Mettre en place le nouveau clip micro-clean en veillant à ce que la marque sur la partie colorée soit positionnée dans l'axe du support de la brosette (fig.15).**

Faire glisser le verrouillage vers le haut à l'aide de l'ancien clip (fig.16). Veillez à ce que le système de verrouillage soit complètement remonté jusqu'en haut afin d'assurer une parfaite fixation du clip.

### Attention !

**Contrôler le positionnement ferme du clip !**

**Ne pas laisser les enfants sans surveillance lors de l'introduction et du remplacement des clips ; ils risqueraient d'en avaler un, en mimant le brosse. Toujours vérifier si le clip est parfaitement fixé, surtout si la brosette est utilisée par un enfant !**

### Recommandation

■ Pour assurer un effet de brosse et de nettoyage optimal, les clips des brosettes devraient être remplacés environ tous les 2 mois, au plus tard lorsque les poils sont recourbés vers l'extérieur (fig.17).

### Remplacement de l'accumulateur

■ Si votre brosse à dents ne peut plus être chargée, l'accumulateur est probablement défectueux.

■ Cet accumulateur peut être changé facilement.

Adressez-vous à un centre Service agréé Calor.

## CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

■ Des manches et des clips de remplacement pour les brosettes sont disponibles comme accessoires dans le commerce et auprès des centres services après-vente Calor sous les références ci-dessous :

Réf. 6990.00 set d'accessoires "1 support et 3 clips brosettes micro-clean".

Réf. 6991.00 set d'accessoires "1 support et 3 clips brossettes rotatives poils normaux médium.

Réf. 6992.00 set d'accessoires "1 support et 3 clips brossettes rotatives poils souples".

(Pour les adresses, voir liste des services après-vente).

■ Lorsque la puissance du moteur diminue sensiblement, il faut contrôler si la brosse à dents rechargeable est suffisamment chargée.

■ Lorsque les oscillations de la brosse rotative diminuent sensiblement, il faut s'assurer que l'embout de la brosette et l'axe d'entraînement sont propres.

Les faire tremper si nécessaire.

■ **Remarque :** Éviter de faire tomber la brosse à dents dans le lavabo ou par terre.

L'appareil pourrait être endommagé, et son bon fonctionnement entravé.

Sous réserve de modifications.