


Dentasonic

Mode d'emploi
Carte de garantie
à lire attentivement

Gebruiksaanwijzing
Garantiekaart
zorvuldig lezen

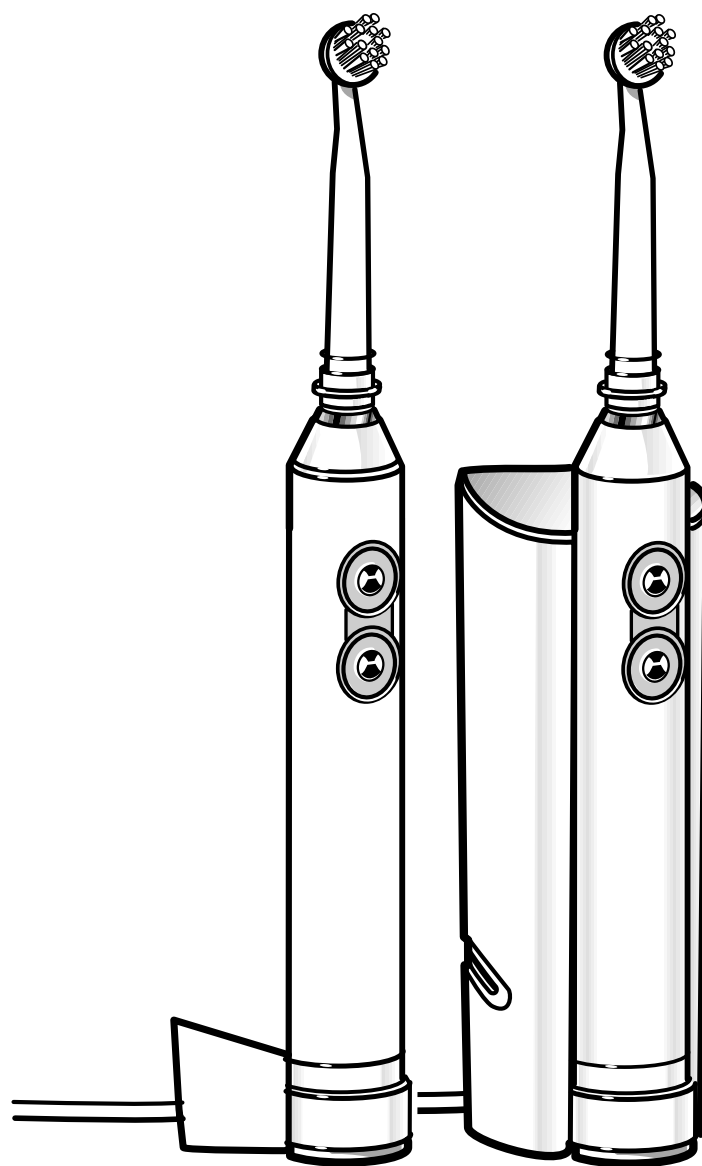


mod. 6971.00

mod. 6973.00

mod. 6975.00

calor[®]

083689/05-00

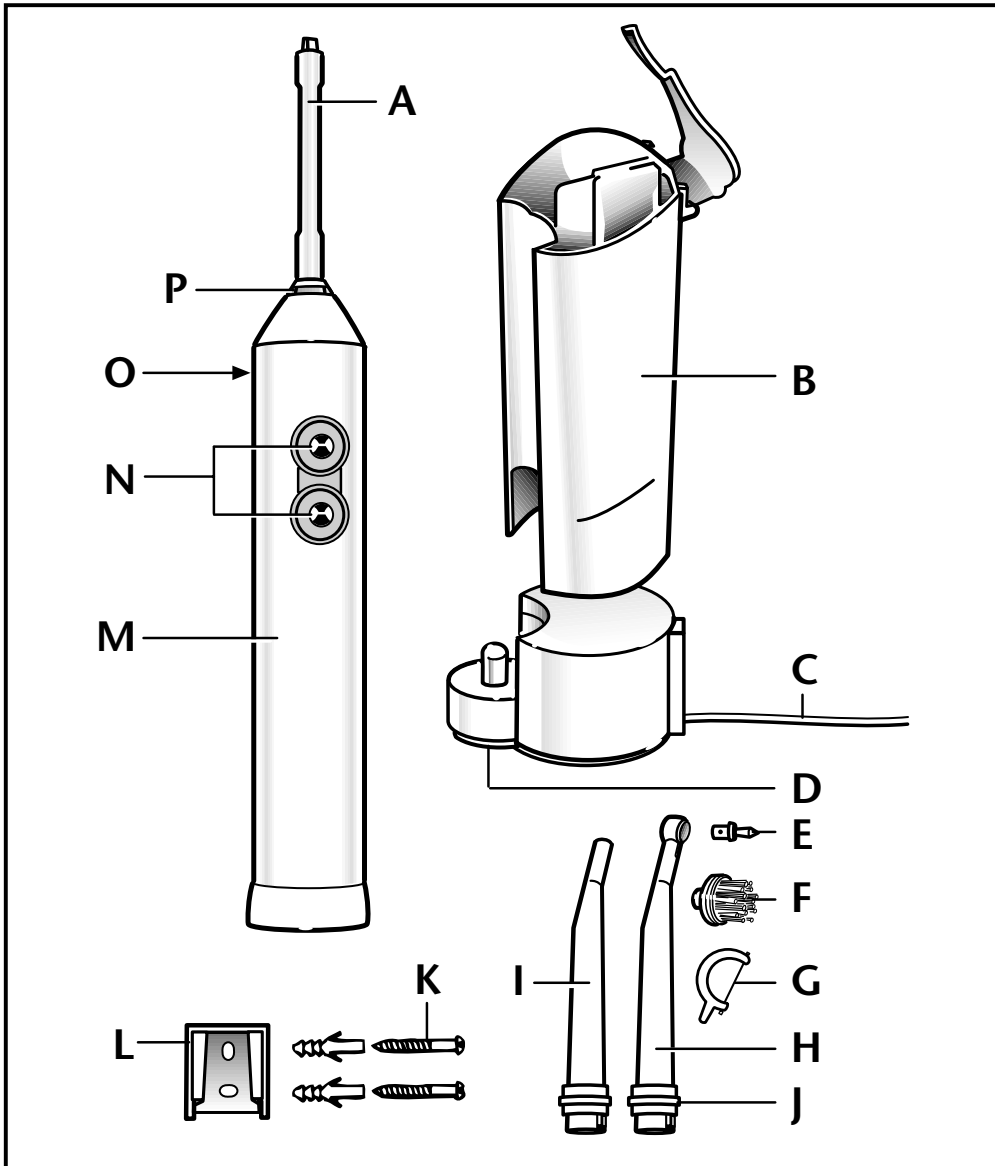

■ Description de l'appareil, voir figure ci-dessus :

A- Axe pivotant

B- Compartiment amovible pour le rangement des accessoires (mod. 6973 et 6975 uniquement)

C- Cordon

D- Chargeur

E- Clip micro-clean (mod. 6973 et 6975 uniquement)

F- Clip brosse douceur

G- Clip fil interdentaire (mod. 6975 uniquement)

H- Tige support des clips brosse douceur et micro-clean

I- Tige support des clips fil inter-

dentaire

J- Anneau de verrouillage à marquage de couleur personnalisé

K- Chevilles pour dispositif de montage mural

L- Support mural

M- Corps de la brosse à dents

N- Interrupteur marche/arrêt

O- Support (au dos)


P- Voyant lumineux

CONSIGNES DE SECURITE

- L'appareil est conforme aux directives communautaires de sécurité et compatibilité électro-magnétique.
- Courant alternatif seulement, vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- **Attention!** La brosse rechargeable possède un accu à tension continue de 2,4 V env. et n'est pas reliée au secteur durant l'utilisation.
- **Prudence!** L'appareil est relié à une tension alternative de 230V–50Hz et ne peut donc pas être utilisé sous la douche, dans la baignoire ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.
- L'appareil doit être fixé de sorte à ne pas pouvoir tomber dans l'eau pendant l'utilisation et le rangement.
- Il faut que la fiche soit accessible après la fixation de l'appareil.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau!
- Débrancher l'appareil avant chaque nettoyage ou entretien.
- Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil si:
 - l'appareil ou le cordon sont endommagés,
 - l'appareil est tombé par terre.
- Dans ce cas, ne pas l'ouvrir, mais le retourner à un Centre Service agréé Calor.
- Un cordon défectueux ou endommagé ne doit être remplacé que par un Centre Service agréé Calor en vue d'éviter tous les risques.
- Ne pas ouvrir l'appareil. En cas d'anomalie, retourner l'appareil complet à un Centre Service agréé Calor.
- Confier les réparations uniquement à un spécialiste. Réparer un appareil soi-même peut constituer un danger pour l'utilisateur.
- Les corps des brosses Dentasonic 6971, 6973, 6975 ne doivent être utilisés qu'avec des chargeurs des modèles équivalents.
- La brosse à dents est équipée d'accus rechargeables. Ne pas les jeter aux ordures ménagères mais les remettre au Centre de service agréé Calor le plus proche ou aux lieux spécialement prévus à cet effet.
- Pour d'éventuelles détériorations de l'appareil dues à une utilisation inappropriée ou non conforme au mode d'emploi (voir: «Ce que vous devez savoir»), aucune responsabilité ne peut engager Calor.
- Si l'appareil ne peut plus servir, le rendre définitivement inutilisable et l'envoyer dans une déchetterie.



MONTAGE MURAL

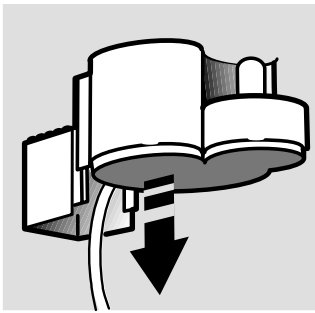

- Pour monter l'appareil au mur, fixer le dispositif pour montage mural au mur, au moyen des vis et des chevilles fournies. Faire glisser le chargeur sur le support mural en l'introduisant par le haut de la glissière de guidage située à l'arrière.
- Il faut que la prise reste accessible après la fixation de l'appareil au mur.


AVANT UTILISATION

Chargement de la brosse à dents rechargeable

- Avant la première utilisation, la brosse à dents rechargeable devrait être chargée pendant environ 24 heures.

- Brancher l'appareil.

- Remarque: le chargeur peut être raccordé à toute prise à tension alternative de 230 V, ainsi qu'à des prises pour rasoir.

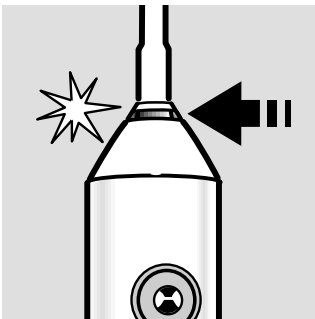


- Arrêter la brosse à dents et la placer sur la broche du chargeur. L'anneau lumineux rouge signale que le chargement est en cours.
- Le voyant rouge de l'anneau lumineux reste allumé aussi longtemps que la brosse à dents se trouve sur le chargeur.

- Remarque : Le corps de la brosse à dents doit toujours être à l'arrêt lorsqu'il se trouve sur le chargeur, sinon il n'y a pas de chargement. Le chargeur peut être constamment branché, une surcharge de la brosse à dents étant impossible. Pour assurer une plus longue durée de vie de l'accumulateur, nous recommandons de le vider périodiquement par l'utilisation avant de le recharger complètement.

L'accumulateur doit être rechargé lorsque la capacité de brossage de la brosse à dents diminue sensiblement.

A pleine charge, la brosse a une autonomie maximale d'environ 60 minutes.

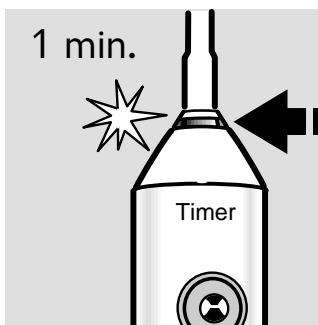


Contrôle de la durée du brossage

(mod 6975 exclusivement)

■ Pour faciliter le respect de la durée de brossage, la brosse à dents Calor est équipée d'un contrôle optique de la durée de brossage. Après un fonc-


tionnement de 1 minute, le voyant rouge de l'anneau lumineux sur le manche s'allume. Nous vous recommandons alors de changer la brosse douceur (1 mn d'utilisation) pour la brosse micro-clean (1 mn d'utilisation). (Voir paragraphe "Utilisation de la brosse à dents"). Lors d'une remise en service de la brosse à dents, le voyant de l'anneau lumineux s'allume de nouveau après 1 minute.

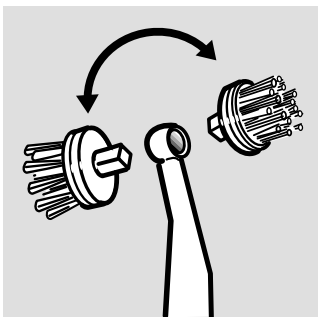

Position des clips

■ Les clips peuvent être mis en place dans deux directions différentes sur le manche. Ceci permet d'accéder aux zones internes ou externes des dents, aux espaces interdentaires d'accès difficile, et de respecter la position indivi-

duelle des dents de chaque utilisateur (voir chapitre "Remplacement des clips")

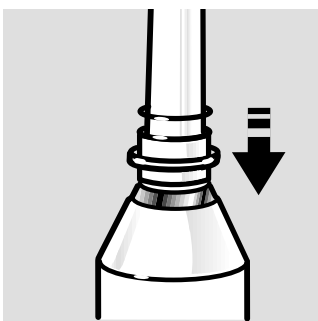

Fixation des tiges supports

■ Insérer une tige support complète sur l'axe pivotant du corps de la brosse et faire glisser l'anneau de verrouillage vers le bas pour fixer la tige support. Faire glisser l'anneau

vers le haut pour enlever la tige support.

■ Le support au dos du corps de la brosse empêche celle-ci de bouger, par exemple lors de l'application de dentifrice.

UTILISATION DE LA BROSSÉ À DENTS

Durant les premiers jours d'utilisation de la brosse à dents, une sensation de picotement peut être ressentie sur les gencives lors du nettoyage, celle-ci disparaissant toutefois après plusieurs utilisations.

La technologie de la brosse Dentasonic peut provoquer des sensations inhabituelles lors des premières utilisations dûes aux micro-vibrations (bruit en bouche, etc...).


Celles-ci s'atténuent après plusieurs utilisations.

Pour assurer un résultat de nettoyage optimal, nous vous recommandons de respecter l'ordre ci-dessous lors de l'utilisation des embouts de la brosse à dents :

- 1. Brosse douceur (au moins deux fois par jour)**
- 2. Micro-clean (au moins deux fois par jour)**
- 3. Fil interdentaire (au moins deux fois par semaine)**

Brosse douceur


- Humidifier les poils, appliquer du dentifrice et ne mettre la brosse en marche qu'après avoir introduit la brosette dans la bouche, en vue d'éviter des éclaboussures du dentifrice.
- Faire glisser la brosse d'une dent vers l'autre, sans appliquer une pression importante. Nettoyer soigneusement toutes les surfaces des dents, les faces internes et les bords. La durée de brosseage minimale recommandée avec la brosse douceur est d'une minute.
- Eteindre l'appareil avant de sortir la brosse de la bouche.
- Prière de tenir compte des recommandations données sous «Nettoyage et entretien».

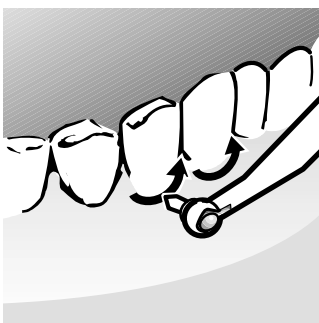

Micro-clean

(mod 6973 - 6975 uniquement)

- Humidifier les poils et placer la pointe de la brosette à l'endroit de contact entre les dents et les gencives. Mettre la brosse à dents en marche. Faire glisser la brosette le long du bord des gencives et dans les espaces interdentaires, sans application de pression importante. Répéter cette opération sur le bord des gencives de la mâchoire supérieure et inférieure, ainsi que sur les faces internes et externes. Utiliser le clip micro-clean pendant envi-ron 1 minute, en fonction de la position individuelle des dents.
- Eteindre la brosse.
- Prière de tenir compte des recommandations données sous «Nettoyage et entretien».

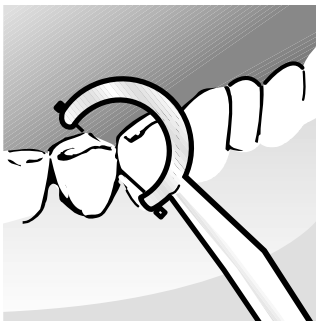


Fil interdentaire vibratoire

(mod 6975 uniquement)

- Pour faciliter l'utilisation du fil interdentaire, il est recommandé de se placer devant un miroir pour le nettoyage.
- Mettre en marche l'appareil et insérer prudemment le fil interdentaire dans l'espace interdentaire. Veiller que le fil dentaire ne blesse pas les gencives. Le nettoyage se fait en déplaçant doucement le fil interdentaire vers le haut et vers le bas, le long du contour des dents.
- Après chaque nettoyage d'un espace interdentaire, rincer le fil interdentaire à l'eau chaude.
- Pour assurer un nettoyage optimal des espaces interdentaires, il est recommandé de remplacer la tête du fil interdentaire dès qu'il est usé.
- A cet effet, enlever le clip d'en haut de la tige support et mettre en place le nouveau clip.

Remarque : Les gencives peuvent légèrement saigner durant les premiers jours d'utilisation d'une brosse à dents électrique si celles-ci sont sensibles. Consulter un dentiste si le saignement devait durer plusieurs jours.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


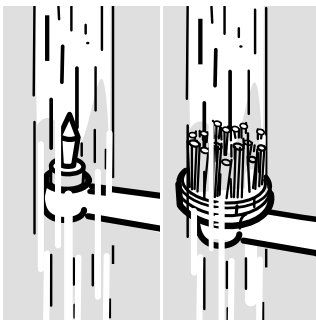


En vue d'assurer un fonctionnement hygiénique et technique durable des accessoires, il faut rincer ceux-ci à fond **après chaque utilisation**.

- Rincer à fond à l'eau chaude les tiges supports équipées des clips, après les avoir détachés du manche de la brosse. Les secouer ou les sécher avant de les remettre dans le compartiment de rangement. Avant une nouvelle mise en place des accessoires sur l'axe pivotant du corps, ceux-ci devraient être **complètement secs**.
- Rincer également le corps de la brosse et le sécher.
- Essuyer éventuellement le chargeur avec un chiffon humide et le sécher.
- Le compartiment de rangement peut être enlevé et lavé à la main ou dans la panier supérieur du lave-vaisselle.

Remarque : Pour conserver l'état hygiénique parfait des accessoires, il est recommandé de placer de temps en temps les tiges supports et les clips brossettes dans une solution de nettoyage pour prothèses dentaires en plus du nettoyage ordinaire.

Remplacement du clip de la brosette

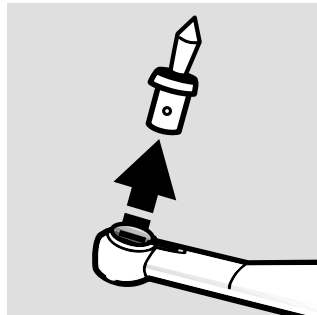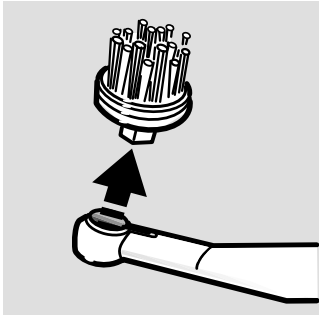

- Pour remplacer le clip usé de la brosette, presser le dos de celui-ci sur une base fixe (par exemple une table), le détacher de l'ancrage sur la tige support de la brosse et l'enlever. Mettre en place un nouveau clip.

ATTENTION!

Contrôler le positionnement ferme du clip! Ne pas laisser les enfants sans surveillance lors de l'introduction et du remplacement des clips; ils risqueraient d'en avaler un en mimant le brossage. Toujours vérifier si le clip est parfaitement fixé, surtout si la brosette est utilisée par un enfant!



Recommandation

- Pour assurer un effet de brossage et de nettoyage optimal, les clips des brosettes **doivent être remplacés environ tous les 2 mois**, au plus tard lorsque les poils sont recourbés vers l'extérieur.
- Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé de remplacer également la tige support des clips brosettes lors du troisième remplacement du clip des brosettes.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

- Lorsque la puissance du moteur diminue sensiblement, il faut contrôler si la brosse à dents rechargeable est suffisamment chargée.

■ Lorsque vous n'arrivez plus à recharger votre brosse à dents, l'accumulateur est probablement défectueux. L'accumulateur défectueux doit être remplacé par l'intermédiaire d'un centre service agréé Calor. Pour assurer le fonctionnement parfait, il faut utiliser un accumulateur Calor spécial.

■ A la fin de la durée de vie de la brosse à dents, l'accumulateur doit être évacué séparément après ouverture du fond du corps de la brosse au moyen d'une pièce de monnaie. En cas d'un écoulement de l'accumulateur, prière de vous laver les mains soigneusement.

■ Les accumulateurs usés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il faut les évacuer par l'intermédiaire de votre détaillant spécialisé en électroménager, d'un centre service agréé Calor ou d'un centre de collecte d'ordures spéciales.

■ Remarque : Éviter de faire tomber la brosse à dents dans le lavabo ou par terre. L'appareil pourrait être endommagé et son bon fonctionnement entravé.

Sous réserve de modifications.

ACHAT D'ACCESSOIRES

■ Les accessoires pour Dentasonic sont disponibles dans votre point de vente habituel et auprès des centres de services agréés Calor sous les références ci-dessous :

- réf. **6985.00** : **accessoire brosse douceur comprenant une tige support et 3 clips brosette.**

- réf. **6986.00** : **accessoire micro-clean comprenant une tige support et 3 clips brosette.**

- réf. **6987.00** : **accessoire fil interdentaire comprenant une tige support et 32 clips brosette.**

■ Les modèles 6971.00 et 6973.00 non équipés de tous les accessoires, peuvent être complétés par l'achat des accessoires 6986.00 et 6987.00.

■ Toutefois et **pour la France seulement** si vous ne les trouvez pas en magasin, vous pouvez les commander en direct sur votre minitel, code : 3615 Calor. Les articles demandés vous parviendront alors par correspondance sous huit jours.

■ Vous pouvez également les commander **en retournant le bulletin ci-contre dûment complété et accompagné de votre règlement à l'adresse suivante.**

CALOR

BP 1

70310 FAUCOGNEY